

BEISTELLTISCH LUXUS

Luxus overbed table



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produkts. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für eine sichere und gefahrlose Nutzung. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgsam durch und bewahren Sie diese stets griffbereit auf.

INHALT

Das Produkt wird fertig montiert in einem Karton geliefert. Der Karton dient der Aufbewahrung/Wiedereinlagerung und darf nicht entsorgt werden. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Beschädigungen sind umgehend dem Lieferanten zu melden. Spätere Reklamationen können nicht angenommen werden.

Lieferumfang

- Aufbewahrungskarton
- Beistelltisch Luxus
- Diese Gebrauchsanweisung

MATERIAL

Der Beistelltisch besteht aus einem Stahlrahmen, einer beschichteten Tischplatte und 4 feststellbaren Rollen. Die Tischplatte wird von einem PVC-Rand geschützt.

TECHNISCHE DATEN

Maße: B 83 x T 40 x H 76 – 105 cm

Plattenmaß: 60 x 40 cm

Neigung Tischplatte: 7 Stufen von 45° bis –45°

Gewicht: 9 kg

Max. Tragfähigkeit: 10 kg (in senkrechter Position)

ZWECKBESTIMMUNG

Der Beistelltisch bietet bettlägerigen Pflegebedürftigen eine praktische und individuell einstellbare Ablagefläche. Wird er unter das Bett geschoben, kann der Pflegebedürftige den Tisch auch im Bett liegend benutzen, z. B. als Hilfe bei der Nahrungs-

aufnahme. Der Beistelltisch steht auf dem Boden und ist damit unabhängig vom Bett positionierbar. Dank der einfachen Handhabung ist der Beistelltisch eigenständig vom Pflegebedürftigen zu nutzen. Die Tischplatte ist stufenlos höhenverstellbar, die Neigung der Tischplatte ist 7-stufig einstellbar.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt ist ausschließlich zur Anwendung im häuslichen Bereich vorgesehen
- Das Produkt sollte nicht draußen gelagert oder verwendet werden.
- Die Tischplatte sollte nicht zerkratzt werden.

INDIKATION

Körperliche bzw. krankheitsbedingte Einschränkungen der Funktion des Beckengürtels, bei verbliebenen Restkräften.



KONTRAINDIKATION

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Beistelltisches sind Kontraindikationen nicht bekannt.



MONTAGE UND EINSTELLUNG

Der Beistelltisch Luxus wird fertig montiert geliefert.

1. Öffnen Sie den Karton, entnehmen Sie den Beistelltisch und entfernen Sie die Schutzfolie.
2. Am Fahrgestell befindet sich ein Federknopf. Diesen ziehen Sie mit einer Hand soweit raus, bis das Fahrgestell mit der anderen Hand in der Neigung verstellt werden kann. Lassen Sie den Knopf in der gewünschten Position einrasten.
3. Unterhalb der Tischplatte befindet sich ein weiterer Federknopf, diesen ziehen Sie ebenfalls mit einer Hand soweit raus, bis die Tischplatte sich mit der anderen Hand in der Neigung verstellen lässt. Den Knopf lassen Sie in eine der 7 Positionen einrasten.
4. Verstellen Sie die Höhe des Beistelltisch mit dem Rädchen, welches sich am zentralen Rohr befindet. Wenn Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben, ziehen Sie das Rädchen an.
5. Überprüfen Sie vor der Benutzung die Stabilität der Tischplatte und blockieren Sie die Rollen.

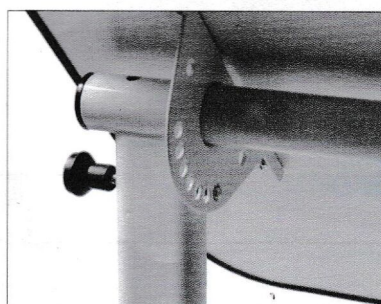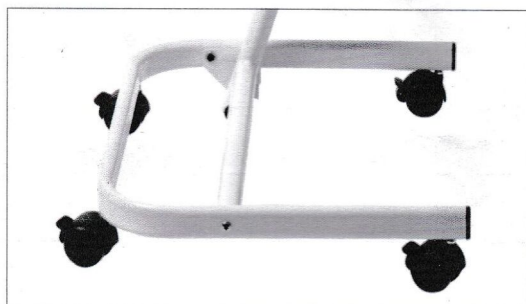

BEISTELLTISCH LUXUS

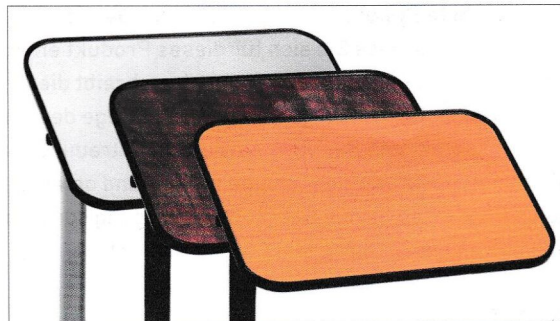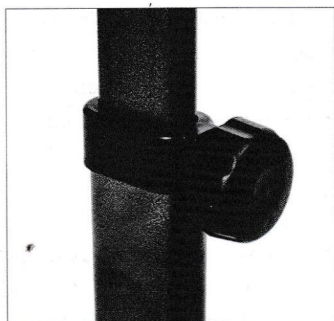

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Alle Teile des Beistelltischs sollten regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch, bei stärkeren Verschmutzungen setzen Sie ein mildes Reinigungsmittel ein. Zur Desinfektion ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel gemäß RKI-Richtlinie verwenden, bitte beachten Sie dabei die Gebrauchsvorschriften des Herstellers.

WIEDEREINSATZ

Der Beistelltisch ist nach einer Überprüfung durch den Fachhändler mit ggf. Austausch defekter Teile und Desinfektion für den Wiedereinsatz vorgesehen.

NUTZUNGSDAUER

Die zu erwartende Nutzungsdauer des Beistelltischs beträgt 5 Jahre, wenn er in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung verwendet wird und unbeschädigt ist. Er kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, sofern er sich in einem sicheren Zustand befindet und keine Schäden aufweist.

WARTUNG

Der Beistelltisch Luxus wurde wartungsfrei konzipiert. In regelmäßigen Abständen müssen die Schrauben auf festen Sitz kontrolliert werden. Sollten Sie beim Produkt Verschleiß fest-

stellen, sollten Sie das vom Fachhändler überprüfen und ggf. die betroffenen Bauteile austauschen lassen.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Sie beinhaltet Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Gewährleistung entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Bei Nichtbeachtung der Vorgaben dieser Gebrauchsanweisung, bei unsachgemäßer Wartung oder unbefugten Eingriffen in das Produkt, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers, erlöschen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche mit sofortiger Wirkung.

ENTSORGUNG

Bitte entsorgen Sie den Beistelltisch auf eine umweltgerechte Art über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften.

NOTIZEN

CARELINE GmbH

Ottostraße 11 | 41540 Dormagen
T +49 2133 2223 0 | F +49 2133 2223 350
info@careline.de | www.careline.de

CARELINE B.V.

Oude Liermolenweg 8 | 2678 MN De Lier
T +31 88 5012400 | F +31 88 5012450
info@carelinebv.nl | www.carelinebv.nl

CARELINE SAS

29 Allée Eugène Ducretet | 26000 Valence
T +33 4 69118940 | F +33 4 69118949
info@careline-group.fr | www.careline-group.fr