

1. Entnahme aus dem Karton



1. Rückenlehne anheben




2. ... und entnehmen.




3. Sitzeinheit entnehmen.

2. Sauger montieren

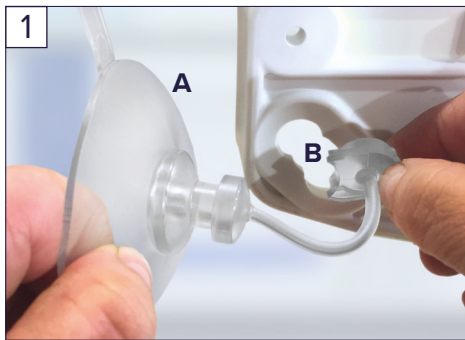


1. Die hinteren Sauger zuerst mit dem beweglichen Verschlussstopfen (B) voraus in die Unterseite der Bodenplatte einführen.

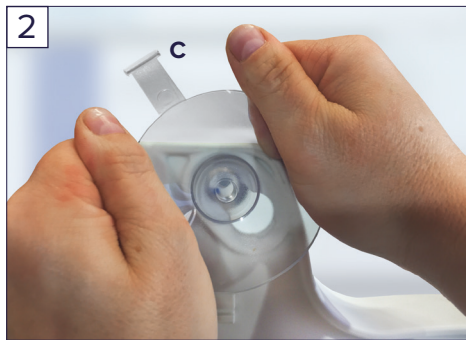

2. Den Pilzkopf (A) des Saugers zur kleinen Öffnung hin durch leichtes Drehen in seine Endlage verschieben. Darauf achten, dass die Entlüftungs-laschen (C) nach hinten schauen.



3. Den Verschlussstopfen von der Oberseite in die Plattenöffnung bündig eindrücken.

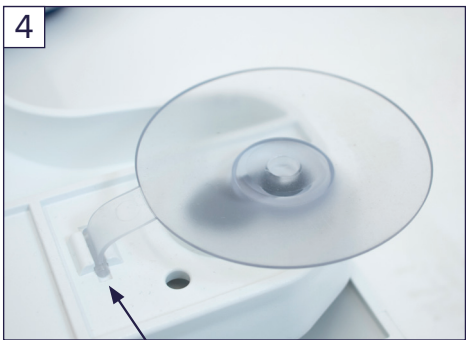

4. Die vorderen Sauger in gleicher Weise einsetzen, hier jedoch zusätzlich die Entlüftungslaschen in die Aussparungen der Bodenplatte seitlich einführen. Dadurch werden die vorderen Sauger beim Herausnehmen automatisch belüftet.

3. Einsetzen der Rückenlehne in die Sitzeinheit




1. Ziehen Sie den roten Betätigungshebel in die oberste Position und halten ihn dort für den gesamten Vorgang des Einsetzens der Rückenlehne in die Sitzeinheit.




2. Zum Einsetzen der Rückenlehne positionieren Sie die Aufnahme des Betätigungshebels über den Bolzen der Sitzeinheit.



3. Führen Sie die Antriebseinheit mit integrierter Rückenlehne, wie im Bild 2 gezeigt, in die Sitzeinheit ein. Nun die Antriebseinheit nach hinten absenken.

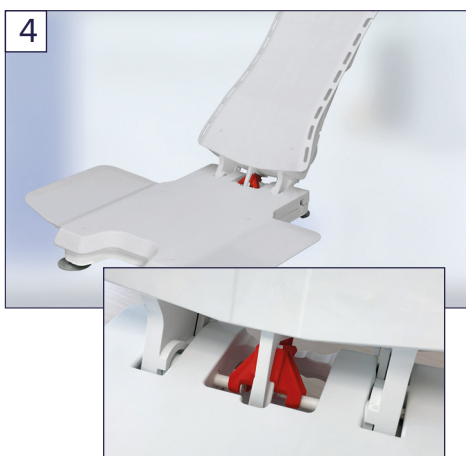


4. Aufladen des Akkus • Einstecken der Handbedienung

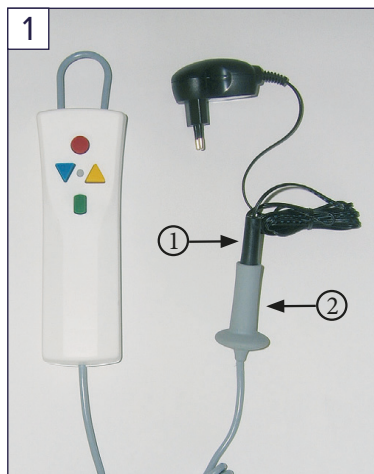

Vor erstem Gebrauch Akku vollständig aufladen bis Kontrolllampe Grün leuchtet.

1. Den Stecker 1) des Netzteils zuerst in die Buchse der Handbedienung 2) und den Netzstecker in eine Steckdose stecken. Beim Ladevorgang leuchtet die Kontrollleuchte rot. Ist der Akku geladen, leuchtet sie grün. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, Handsteuerung vom Ladegerät trennen. Zuerst den Netzstecker ziehen.

Lagerung bei etwa 15-20 Grad Celsius empfehlenswert. Handsteuerung nicht auf den Heizkörper legen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

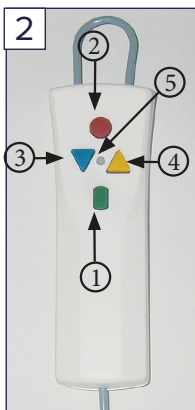

2. Handbedienung Beschreibung:

1. Grün Einschalt-Taste
2. Rot: Stop-Taste
3. Blau: Abwärts-Taste
4. Gelb: Aufwärts-Taste
5. Kontrolllampe



Falsch!



Richtig!

3. Die Handbedienung am Rückenteil hinten einstecken. Hierzu die Buchse am Spiralkabel auf den Stecker schieben, bis die Verriegelung spürbar einrastet und der rote Ring am Klinkenstecker nicht mehr sichtbar ist.


Verwenden Sie zur Reinigung keine hochdosierten Chlor-Reiniger!

Quick instructions – initial installation

1. Remove from box



1. Lift back rest

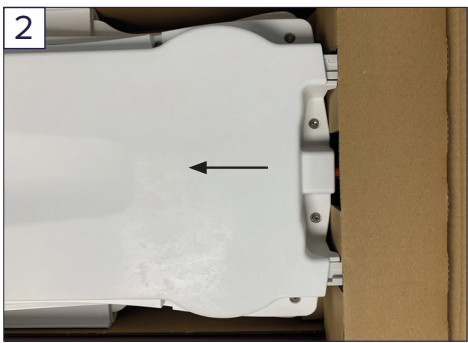


2. ... and remove.



3. Remove seat unit.

2. Mount suction cups

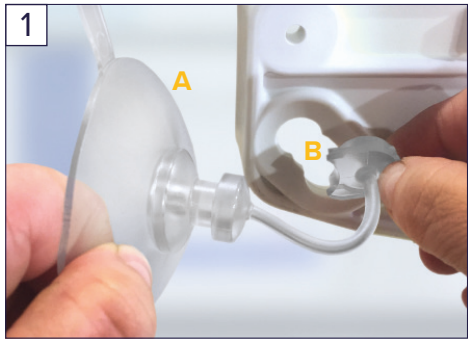


1. To insert the rear suction cups, begin by first inserting the movable plugs (B) into the underside of the base plate.



2. Push the mushroom head (A) of the suction cup toward the small opening by gently rotating it into its final position. Make sure the vent tabs (C) are pointing downward.




3. Push the plug from the upper side into the plate opening until it is flush.

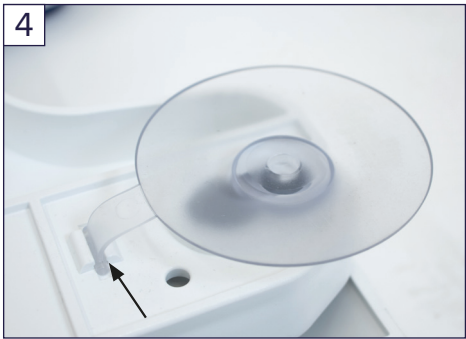

4. Insert the front suction cup in the same way. In this case, however, you must also insert the vent tabs into the base plate slots from the side. This will automatically vent the front suction cups during removal.


3. Insert back rest into seat unit

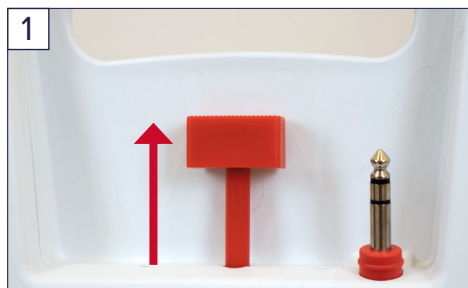


1. Pull the red control lever to the uppermost position and hold it there throughout the entire process of inserting the backrest into the seat surface.




2. To insert the back rest, position the control lever mounting fixture over the bolt in the seat unit.

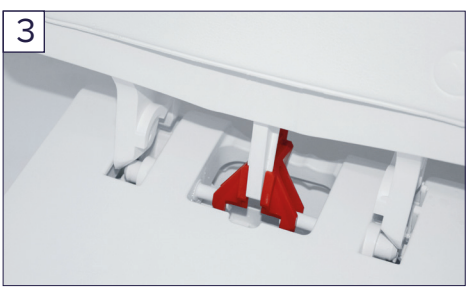

3. Insert the drive unit with the integrated back rest into the seat unit as shown in Fig. 2. Now reposition the drive unit down and to the back.

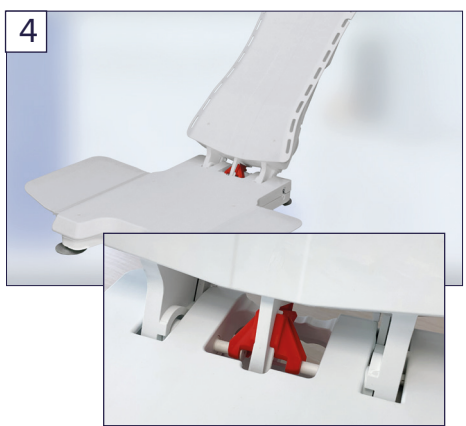


4. Charging the battery • Plugging in the manual control • Care and maintenance

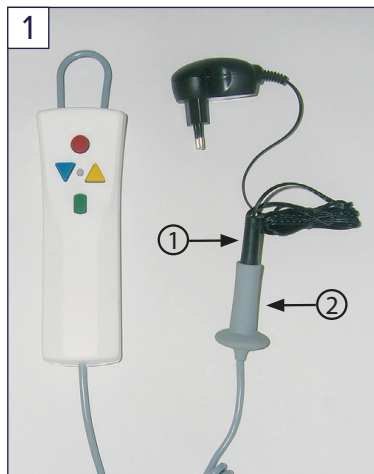

Charge the battery completely before using for the first time.

1. First plug the power supply adapter 1) into the socket 2) attached to the manual control and plug the power supply adapter into an electrical outlet. The control light will be red while charging and will turn green when the battery is charged. Once the battery is fully charged, disconnect the manual control from the charger unit. First remove the power plug from the electrical outlet.

Storage at roughly 15–20 degrees Celsius is recommended. Do not place the manual control on a source of heat. Avoid direct sunlight.

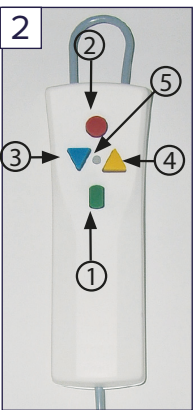

2. Manual control description:

- 1. Green: On button
- 2. Red: EMERGENCY OFF button
- 3. Blue: Down button
- 4. Yellow: Up button
- 5. Control light



Incorrect!



Correct!

3. Plug in the manual control behind the back rest. To do this, take the socket attached to the coil cord and slide it onto the plug until it noticeably clicks into place and the red ring on the headphone-style plug is no longer visible.

Do not clean using any highly concentrated chlorine-based cleaning agents!