

Gebrauchsanleitung

Beistell-Tisch Comfort

Art.-Nr. 11210 000	weiß	PHV-Nr. 50.45.04.0015	PZN 00828495
Art.-Nr. 11210 010	weiß mit Seitenplatte	PHV-Nr. 50.45.04.0016	PZN 00828466
Art.-Nr. 11210 100	Buche	PHV-Nr. 50.45.04.0015	PZN 10037607
Art.-Nr. 11210 110	Buche mit Seitenplatte	PHV-Nr. 50.45.04.0016	PZN 10037599



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Indikation

Der Beistelltisch ist dafür vorgesehen in Verbindung mit einem Kranken- oder Pflegebett verwendet zu werden. Er dient den Patienten und Pflegebedürftigen, die überwiegend bettlägerig sind, in der täglichen Pflege-Praxis als wertvolle Unterstützung z. B. bei der selbstständigen Körperpflege im Bett, beim Essen und Trinken im Bett oder auch bei therapeutischen Maßnahmen. Nicht eingeschränkten Anwendern dient der Beistell-Tisch als praktischer Helfer im Alltag, z. B. beim Schreiben, Lesen, Essen und vielem mehr.

Kontraindikation

Es bestehen keine Kontraindikationen.

! Sicherheitshinweise !

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von der Funktionsfähigkeit, Stabilität und dem ordnungsgemäßen Zustand des Beistell-Tisches und des Zubehörs!
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und die Festigkeit des Produktes und ggf. den festen Sitz der Schrauben!
- Beachten Sie unbedingt die maximale mittige Belastbarkeit des Beistell-Tisches von 10 kg bei horizontaler Positionierung!
- Verwenden Sie den Beistell-Tisch nicht als Aufrichtehilfe aus dem Liegen!
- Lehnen oder stützen Sie sich nicht auf den Beistell-Tisch!
- Bremsen Sie im Stand immer alle vier Laufrollen!
- Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen – Klemm- und Kippgefahr!
- Vermeiden Sie den Kontakt von heißen Gegenständen mit der Tischplatte!

Anwendung/Montage

Einstellen des Beistelltisches:

1. Neigung der Säule

Die gesamte Säule kann entsprechend den Wünschen des Pflegebedürftigen bzw. den räumlichen Verhältnissen geneigt werden. Zum ersten Aufstellen des Beistell-Tisches stellen Sie die Säule rechtwinklig zum Tischfuß ein. Hierzu ziehen Sie den Knopf am unteren Ende der Säule (siehe Nr. 1) und bewegen mit der anderen Hand die Säule in die gewünschte Stellung. Durch Loslassen des Knopfes rastet er in eine der vorgegebenen Positionslöcher ein.


Achtung: Eine starke Neigung der Säule schränkt die Kippsicherheit ein.

2. Positionierung der Tischplatte

Die Tischplatte kann wahlweise waagrecht oder schräg eingestellt werden. Zum Verändern des Neigungswinkels ziehen Sie mit der einen Hand den Knopf an der Seite (siehe Nr. 2) und stellen mit der anderen Hand die gewünschte Neigung der Tischplatte ein. Das Loslassen des Knopfes fixiert die Position an der vorgegebenen Lochung.

3. Stufenloses Verstellen der Tischhöhe

Die Höhe der Tischplatte kann zwischen 66 und 98 cm verändert werden. Dazu lösen Sie die Schraube durch Drehen nach links (siehe Nr. 3). Ziehen Sie die Mittelstange bis zur gewünschten Höhe nach oben bzw. nach unten und fixieren Sie diese Position durch Festdrehen der Schraube im Uhrzeigersinn.

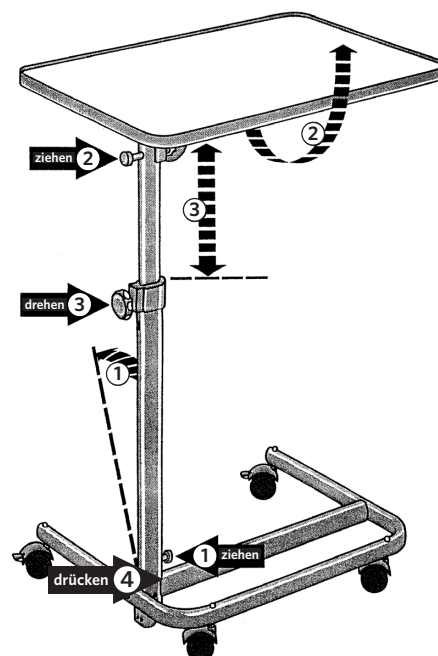

4. Fixieren der Standposition

Sie stellen den Beistell-Tisch fest, indem Sie mit Ihrem Fuß die Rollenbremse der Doppelrolle nach unten drücken (siehe Nr. 4). Die Feststellung können Sie durch Hochstellen der Rollenbremse wieder lösen.


5. Montage der Seitenplatte

Im Rohrstück des Tisches befinden sich zwei Feststell-Löcher für eine waagerechte und eine schräge Positionierung der Säule.

Stecken Sie die Seitenplatte mit dem seitlichen Rohr in die Öffnung am Beistell-Tisch und lassen den Stift in Loch A einrasten. Dann mit der integrierten Flügelschraube festdrehen.

Für einen Neigungswinkel der Säule $< 75^\circ$ muss die Seitenplatte für die waagerechte Stellung in Loch B eingerastet werden.

Hinweis: Nur wenn der jeweilige Stift sichtbar und spürbar aus der Bohrung »herausschaut«, ist die Platte sicher eingerastet und kann festgedreht werden!

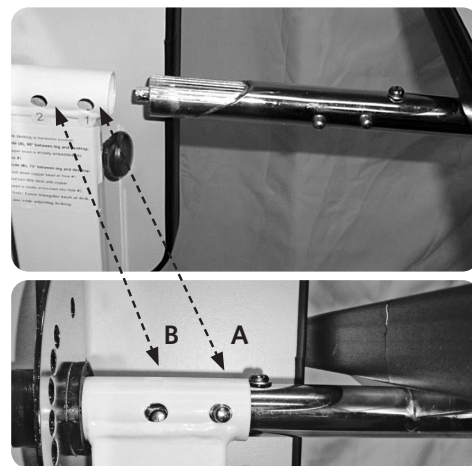

6. Befestigung der Rollen

Die Rollen liegen separat bei und können einfach in die dafür vorgesehenen Löcher unten am Gestell eingeklickt werden.

Reinigung

Der Beistell-Tisch ist nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt. Im Allgemeinen ist eine routinemäßige (feuchte) Wischreinigung hygienisch ausreichend. Für die manuelle Reinigung ist ein milder Haushaltsreiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem DGHM-/VAH-gelisteten, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Die Auswahl und Anwendung geeigneter Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben vorzunehmen.

Wiedereinsatz

Der Beistell-Tisch ist für den mehrfachen Wiedereinsatz geeignet. Er ist entsprechend den Anweisungen zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist er durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für den Wiedereinsatz freizugeben.

Material

- Säule und Fuß: Stahl
- Tischplatte: Holzplatte mit Kunststoff-Rahmen
- Rollen/Verstellknöpfe: Stahl mit Kunststoff-Mantel

Entsorgung

Entsorgen Sie den Beistelltisch nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

Technische Daten

Art.-Nr. 11210 000, 11210 100

- Maße Tischplatte: 40 x 60 cm
- Gesamtgewicht: 9 kg
- Maximale, mittige Belastbarkeit Tischplatte bei waagerechter Positionierung: 10 kg
- Maximaler Neigungswinkel Säule: 80°
- Höhenverstellung: 66–98 cm

Art.-Nr. 11210 010, 11210 110

- Maße Tischplatte: 40 x 60 cm
- Gesamtgewicht: 10,3 kg
- Maximale, mittige Belastbarkeit Tischplatte bei waagerechter Positionierung: 10 kg
- Maximaler Neigungswinkel Säule: 80°
- Höhenverstellung: 66–98 cm
- Maße Seitenplatte: 40 x 16 cm
- Gewicht Seitenplatte: 1,3 kg
- Maximale Belastbarkeit Seitenplatte: 1 kg

Fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach dem RUSSKA **Ratgeber »Pflege zu Hause«**.

Dort lesen Sie Produktinformationen und Anwendungshinweise über weitere Pflegehilfsmittel. Sie finden außerdem praktische und nützliche Tipps für die Pflege im häuslichen Bereich und zum Thema Pflegeversicherung.

Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes unter info@russka.de sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.

